



**PROMAG**  
**PULZÁLÓ MÁGNESTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*A mindenki számára elérhető egészség*

**Mission & Vision Kft**

2045 Törökbálint, Meggyes u. 26.

Tel.: 06-23-334674 fax: 06-23-334674

email: [info@bestbuynet.hu](mailto:info@bestbuynet.hu)

honlapok: [www.bestbuynet.hu](http://www.bestbuynet.hu) [magnesterapia.info](http://magnesterapia.info)

*Ne használja a készüléket, amíg nem olvasta el ezeket az instrukciókat, és amíg meg nem érti az ebben leírtakat!*

**Figyelem! Betegség esetén a mágnesoterápia nem használható kizárólagos gyógymódként! Betegség vagy annak gyanúja esetén forduljon orvoshoz, és az általa előírt kezelések mellett - orvosával egyeztetett módon - kiegészítő terápiaként használja a PROMAG -ot!**

**Ellenjavallat: ismeretlen vagy bizonyosan baktériumok okozta lázas megbetegedések, túlműködéses hormonbetegségek /pl. pajzsmirigy-túltengés/, epilepszia és terhesség esetén ne használja. Amennyiben pacemakert, inzulin pumpát, vagy egyéb elektronikus implantátumot használ, kérjük hogy a saját érdekében feltétlenül konzultáljon orvosával!**

## **AZ ELEKTROMÁGNESES MEZŐ**

Minden életfolyamat, legfőképpen valamennyi sejt anyagcseréje a mágneses energián alapul. Az önszabályozó mechanizmusok és az öngyógyító erők a szervezetben csak akkor funkcionálnak, ha energiával látjuk el őket.

Magasan civilizált, modern világunkban a fizikai és lelki gyakorlatok hiánya, a rossz és rendszertelen táplálkozás, a túlhajszolt életmód, a túltápláltság, valamint a környezeti stressz hatások elégtelen anyagcseréhez, energia diszharmóniához vezetnek.

És mindez,

- túlérzékenységet jelent a fertőzésekkel és a betegségekkel szemben,
- segít a degeneratív folyamatok, krónikus betegségek kialakulásában,
- az életenergia hanyatlásában.

A **PROMAG** mágnesoterápiának köszönhetően lehetőségünk nyílik arra, hogy a természetes energia egyensúlyt speciális elektromágneses impulzusokkal helyreállítsuk. A szervezet sejtjei több energiát képesek előállítani, ha az anyagcsere működésüket serkentjük.

A **PROMAG** használatával támogatjuk szervezetünk öngyógyító folyamatait, az anyagcserénk helyreáll, és újra normális működésbe lép, segítségével elérhető az egyénileg - genetikailag - meghatározott optimális egészségi állapot.



**A PROMAG MÁGNESTERÁPIÁS RENDSZER  
AZ ÉLET TERMÉSZETI TÖRVÉNYEIN ALAPSZIK**

## 2) A MÁGNESES TÉR

Az elektromos töltés generálta villamos mezőhöz hasonlóan létezik a mágneses tér. Ennek vizsgálatára az úgynevezett elemi mágneset használjuk. Ennek legalkalmasabb eszköze az iránytű.

Az egységnyi mágnesre a mágneses tér erővel hat. Azt a teret, ahol érzékeljük a mágneses erőhatást, nevezzük mágneses erőternek. A föld mágneses tere, az elektromos és gravitációs térhez hasonlóan erővonalakkal tehető szemléletessé.

Nagyon egyszerű és látványos otthoni kísérlet, ha fehér lapra vasreszeléket szórunk és ezután a lap alá helyezünk egy állandó mágneset. Ennek hatására szépen kirajzolódik a mágnes körül az erővonal rendszer.

A Föld mágneses tere csak kis részt származik a föld belsejében meglévő természetes mágnességéből, jórészt a föld forgásából és a légkörben fellépő áramok gerjesztése révén alakul ki. A Földet körülvevő, mágneses jellegű héjat magnetoszférának nevezzük.

### AZ EMBER A FÖLD MÁGNESES TERÉBEN ALAKULT KI ÉS FEJLŐDÖTT OLYANNÁ AMILYEN

Az élő szervezetek számára a mágneses mező, akár csak a gravitációs mező informatikai hatásként nyilvánul meg, ha tehát a Föld mágneses terének fizikailag jellemzői megváltoznak, akkor annak az élet számára drasztikus és beláthatatlan következményei lehetnek, hisz ez a tér rendkívül komplex.

Sajátos idő és térbeli ritmusa és dinamikája van. Ezt a ritmust pedig technikai eszközeinkkel könnyen befolyásolhatjuk és ezzel közvetve saját biológiai ritmusunkat is.

Nagyon egyszerű, és látványos állatkísérlettel kutatták a mágneses erővonalak ritmusosságát. Egy kis kamrába, amelynek kijáratát pontosan É-D irányba helyezték el, kísérleti alanyként éti csigát tettek. Valahányszor kibújt a csiga, mérték azt a szöveget, amivel eltért az É-D iránytól. Az eltérések egybeestek a föld mágneses irányának napszakonkénti ritmusával.

A vándormadarak, a méhek tájékozódó képessége szintén a Föld mágneses teréhez kötődik. Ezek az állatok közvetlenül képesek érzékelni a mágneses teret.

Kutatók megállapították, hogy a sejtek kommunikációja a biofotonok szintjén történik extrém alacsony frekvenciájú hullámokkal.

## 3) A MÁGNESES TÉR HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE

Mint már említettük, az emberi evolúció a Föld mágneses terében alakult ki és fejlődött olyanná amilyen. Az élő szervezet számára a mágneses tér, akár csak a gravitációs mező - informatikai hatásként nyilvánul meg - így, ha a Föld mágneses terének jellemzői megváltoznak, annak az élet számára drasztikus és beláthatatlan következményei lehetnek, ezt már egyszer leírtuk, de nem győzzük hangsúlyozni!

Az élőlények anyagcseréjük optimális működése érdekében nemcsak a saját testük elektromágneses energiáját használják, hanem külső tereket is igényelnek. A Föld mágneses terének jelentősége az élethez az ember úrutazásával került előtérbe.

### GRAVITÁCIÓ NÉLKÜL LEHETSÉGES AZ ÉLET, A FÖLD MÁGNESES TERE NÉLKÜL AZONBAN NEM.

Állatkísérletekkel bizonyították, hogy mágneses térerő nélküli környezetben az egerek csak néhány hétig voltak életképesek. Azonban mikor időről időre kihelyezték őket a Föld mágneses terébe, megfelelően tovább éltek!

Már az időszámítás előtt is ismerték és alkalmazták a mágnes gyógyító hatását, erejét. Gyakran használták rontás ellen, valamint a szépség és fiatalság megőrzésére, de szem-betegségeket és székrekedést is gyógyítottak vele.

Bolygónk egy óriási mágnesnek tekinthető, melynek északi és déli sarka, azaz két pólusa között vándorol a mágneses energia. Az idők folyamán azonban ezek a pólusok többször helyet változtattak, ennek hatására pedig folyamatosan csökkent mágneses ereje.

Egy japán kutató szerint az utóbbi 500 évben csaknem 50%-os volt a csökkenés!

Egyes kutatók ezzel a folyamattal magyarázzák bizonyos szárazföldi és tengeri élőlények pusztulását, mások pedig azt állítják, hogy minden élő szervezetre ártalmas az energiaszint csökkenése, sőt számos új betegség megjelenésének és terjedésének az okozója.


A mágneses erő gyógyító hatásáról elsőként Arisztotelész számolt be, a tudósokat azonban napjainkban is élénken foglalkoztatja ez a kérdés. Kanadában végzett kísérletek során bebizonyosodott, hogy a mágneses kezelésnek alávetett vetőmagok sokkal gyorsabban kelnek ki, és a belőlük kikelt növények dinamikusabban fejlődnek, mint azok, amelyeket nem kezeltek.

Japánban széles körű kutatást folytattak a mágneses tér emberi szervezetre gyakorolt hatásával, vagyis a gyógyító mechanizmussal kapcsolatban. Kiderült, hogy a gyengén pulzáló mágneses mező alkalmazásával az említett "civilizációs" betegségek sikeresen kezelhetők, hiszen itt főként a mágneses mező hiányából, és ebből következően a tökéletlen anyagcseréből fakadó problémákról van szó.

### HA SEJTJEINK EGÉSZSÉGESEK, A SZERVEZETÜNK IS EGÉSZSÉGES!

Az élő szervezet legkisebb egysége a sejt. Az emberi szervezet 70-100 billió különböző specializált sejtből áll, ezek harmonikus csoportjai alkotják a szöveteket és a szerveket. Minden gondolat, minden idegi impulzus, a hormonok szállítása és hatásai, a sejtek teljesítő- és kommunikációs képességétől függ.

A sejtek anyag- és energiacseréje ioncsere révén, a sejtmembrán pozitív és negatív polaritásának váltása következtében megy végbe.

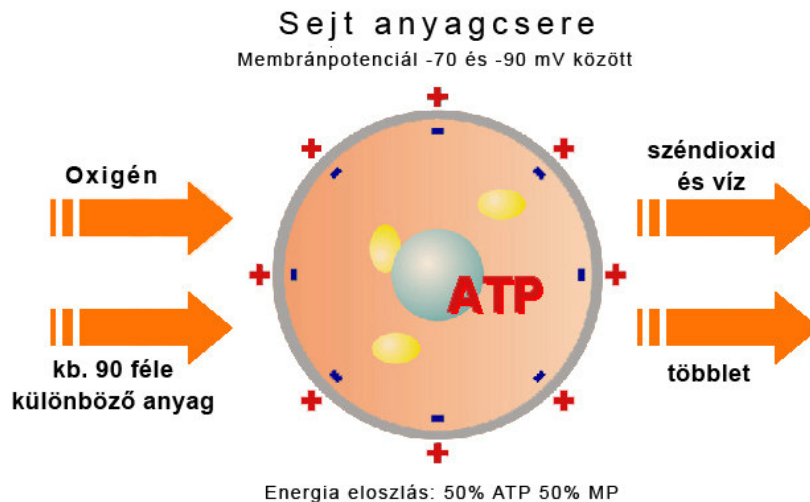

A sejt működéséhez energiára van szükség, amelyet saját maga állít elő az anyagcsere által. Ez a folyamat oxigént és tápanyagot igényel. A tápanyag felszívását és a salakanyagok kiválasztását az elektromágneses energia kontrollálja. Ha ezeket a funkciókat az elektromágneses energia nem szabályozná, és nem koordinálná, akkor az élet lehetetlenné válna.

A sejt energia szintjének csökkenése a sejtmembrán zavarához, majd funkciózavarhoz és végül szervkárosodáshoz vezet. A folyamat végén az ember kimerültnek, túl fáradtnak

érzi magát, a szervezet az életkorhoz képest túlzottan előregszik, és betegség támadja meg, kibillen egyensúlyából.

A pontosan adagolt pulzáló elektromágneses mező, amelyet a PROMAG rendszer állít elő, javítja az oxigénellátást, és ezáltal aktivizálja az anyagcserét. Az egészség és a fizikai teljesítőképesség pozitívan fejlődik.

### **AZ EMBER ÉLETMINŐSÉGE JAVUL!**

A stressz, a mozgáshiány, a nem megfelelő táplálkozás, a Föld mágneses erejének jelentős lecsökkenése, a sok káros környezeti hatás megzavarja az optimális feltételeket, s így a sejtenergia és a vitalitás hiánya lép fel, ami különféle betegségekhez vezethet.

A regenerációs folyamatok beindításával a legkülönbözőbb betegségeknél érhető el teljes vagy részleges gyógyulás (csak orvosi kezelés kiegészítésére alkalmazható!!!):

- traumák,
- vérkeringési panaszok,
- vérellátási zavarok,
- migrén,
- idegrendszeri betegségek,
- mozgásszervi megbetegedések,
- csontritkulás,
- reumatikus panaszok,
- kopások,
- porckorongsérv,
- nőgyógyászati,
- emésztőszervi,
- szexuális panasz
- anyagcserezavarok,
- nehezen gyógyuló sebek.

#### Összefoglalva:

*A sejtek mágneses erőterrel történő regenerálása a természet gyógyító mechanizmusán alapszik. A szervezetben az alacsony frekvenciájú mágneses erőter hasznosítása révén felgyorsul az anyagcsere. Az **PROMAG** szabályszerűen oldja a mindennapos stressz és semlegesíti a káros környezeti hatásokat. A sejtek aktív regenerálása fontos eljárás az immunrendszert károsító szindrómák megelőzése céljából. A **PROMAG** mozgósítja a szervezet saját energiáit és korszerű módon teszi lehetővé az egész család számára az egészség megővését.*

*A PROMAG elektromágneses terápia kúraszerűen és permanensen egyaránt igénybe vehető akár egészségünk megőrzése, - a civilizációs betegségek elkerülése érdekében - akár akut vagy krónikus problémák kezelésében.*

#### **5) A MÁGNESES MEZŐ SZERVEZETRE GYAKOROLT LEGFONTOSABB HATÁSAI A KÖVETKEZŐK:**

- általános regulációs hatással bír,
- a csont- és porcsejteket stimulálja,
- az idegsejteket regenerálja,
- a sebgyógyulást gyorsítja,
- az anyagcsere folyamatokat javítja,
- stresszhormon-receptorok érzékenységét csökkenti, ezáltal növeli a stressztűrő képességet,
- a bélben található plexus myentericust szabályozza,

- ezáltal az emésztési zavarokat megszünteti,
- a melatonin nevű hormon kiszórását elősegíti, ezáltal megszünteti az alvászavart
- megerősíti az immunrendszert,
- a vegetatív idegrendszerre és a limfociták működésére is hatással van,
- a gyógyszereknek nagyobb a határfoka a feljavított anyagcsere és vérellátás által,
- a szívritmust normalizálja, a légzőizmok feljavított működésén keresztül a légzést
- az összetapadt vörösvértesteket szétválasztja, viszkozitásuk csökken.

## 6) ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

*A betegségek közös jellemzője a sejtek működési zavara, a sejt struktúrájának a károsodása, amiből mindig az anyagcsere és az energiaháztartás károsodása következik. Itt, ezen a síkon avatkozik be a **PROMAG** terápia, emiatt számtalan az alkalmazási területe.*

### **A PROMAG készülékek főbb orvosi kezelést kiegészítő terápiás alkalmazási területei a következők:**

- betegségmegelőzés,
- a stressz csökkentése,
- vérellátási zavarok és a keringési rendszer problémáinak kezelése,
- a sebgyógyulás gyorsítása,
- a csontok beforradásának elősegítése,
- az izomfeszülések megszüntetése,
- alvászavarokkal és stresszel összefüggő egyéb megbetegedések kezelése,
- sport területén a teljesítmény növelésére,
- sérülések kezelésére és a regeneráció meggyorsítása
- anyagcsere-betegségek kezelése,
- szív- és érrendszeri betegségek terápiajában,
- depressziónál, magas vérnyomás kezelésében,
- cukorbetegségben,
- ideggyulladások,
- idegsérülések,
- idegi eredetű betegségek esetén
- a gyógyszerfogyasztás csökkentés
- az immunrendszer megerősítése,
- bőrbetegségek kezelése

### **Fontos!**

*A mágneses rezonancia elvén alapuló készülékek használata természetesen nem helyettesíti az egészséges életmódot, megfelelő terápiaként alkalmazva viszont kiegészíti azt, illetve a bekövetkezett betegség esetén a gyógyítás hatékony eszköze lehet. A készüléket a fejlesztők a legújabb orvosi felfedezések, tapasztalatokat, valamint a természetgyógyászok ajánlásait figyelembe véve a mai kor embere számára fejlesztették ki.*

### **A PROMAG készülékek rendszeres használata hatással lehet a következő esetekben (orvosi kezelést nem helyettesítheti!):**

- Csökkenti a koleszterinszintet, normalizálja a vérnyomást, mérsékli a vér rögződés hajlamát, normalizálja a szívritmust, növeli a stressz tűrő képességet, javítja a szövetek oxigénellátását, harmonizálja a vegetatív idegrendszert.
- Rendszeres, naponta kétszeri alkalmazással elkerülhetők a napjainkban oly sok ember halálát vagy munkaképesség vesztesét okozó keringési betegségek,

melyeknek hátterében a tartós stressz, a mozgásszegény életmód, az ésszerűtlen táplálkozás, valamint azon környezeti hatások állnak, melyek a szerveinket felépítő sejtek energiaszintjét károsan befolyásolják.

- A PROMAG terápia a sejttanyagcserét javító hatása révén komoly prevenció és rehabilitációs lehetőségeket rejt magában a keringési rendszer problémái és a vérellátási zavarok kezelésében. Az ellenőrző vizsgálatok tanúsága szerint már néhány PROMAG kezelés is kedvezően befolyásolja a szívritmust, a vérnyomást, a vér átfolyási sebességét és viszkozitását, valamint a légzéstérfogatot. A kezelés egyéb kedvező hatásai között kell megemlíteni, hogy a feljavított vérellátás következtében megnő a gyógyszerek hatásfoka, tágulnak a vérerek.

### **A PROMAG készülékek eredményesen használható traumák utáni rehabilitációban, illetve egyes tartós betegségek kezelésében, orvosi kezelést kiegészítve:**

- Agyvérzés, bénulás, cukorbetegség és szövődményei (impotencia, infarktus, nehezen gyógyuló sebek), magas vérnyomás, visszeres panaszok, trombózisra való hajlam, szívaritmia és szívelégtelenség, érszűkület, szívinfarktus, vérömlenyek, perifériás vérellátási zavarok, érlemeszesedés, szívkoszorúér megbetegedés.
- Külföldi tanulmányok, hazai orvosok, természetgyógyászaink tapasztalatai azt mutatják, hogy a magas vérnyomást már egy hónapon keresztül történő, legalább heti 3 alkalomból álló kezeléssorozattal 140/90 Hgmm-re sikerül levinni. A hatásmechanizmus a következő: a kezeléssorozat hatására az erekben megnő az átfolyási sebesség, ezáltal csökken a vérnyomás.
- Különösen jó eredménnyel kezelhetők a perifériás keringési zavarokban szenvedő egyének, a cukorbeteg, az érszűkületben szenvedők. Náluk a feljavult vérellátás már rövid időn belül érzékelhető.

## **7) A VÉR VISZKOZITÁSÁNAK JAVULÁSA MÁGNESTERÁPIÁS KEZELÉS HATÁSÁRA**

A vörösvértetek tekerccszerű elrendeződést mutattak terápia előtt, mely



- növekedett vér viszkozitást
- aktív felület lecsökkenését
- oxigénhiányt
- megnövekedett trombózis veszélyt rejt magában.

A tekerccszerű elrendeződés megszűnt a terápia után, mely során



- csökkent a vér viszkozitása
- az aktív felület megnőtt
- javult az oxigénfelvétel
- csökkent a trombózis veszély

## 8) A PROMAG KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A PROMAG pulzáló mágnesterápiás rendszer német gyártmányú, évente több ezres szériában értékesítik. **CE 1275 EU minősítéssel rendelkező, IIa orvosi kategóriába sorolt berendezés.** A németországi patikai regisztrációs száma: PZN 3708484. A készülék a 185x60 cm-es matracból, a vezérlőegységből és a tápegységből áll. A termékhez 2 év garancia jár.

### Funkciók, üzemmódok:

- Folyamatos vagy szakaszos üzemmód (6 mp sugárzás, 3 mp szünet, 6 mp sugárzás)
- A frekvenciák 1 Hz-es lépésekben állíthatóak 0-19 Hz tartományban
- Frekvencia pásztázásos üzemmód: 5 mp-es ütemben lépked körbe az összes frekvencián 1 - 19 Hz között , így különféle szerveinket, szöveteinket "szólítja meg"
- Automatikus kikapcsolás 30 perc múlva az 5 -19Hz-es frekvenciatartományban
- A mágneses impulzus erőssége 6 lépésben állítható

### Műszaki adatok:

- Tápfeszültsége: 12V, 1000mA
- Frekvenciatartomány: 1 - 19 Hz
- Mágneses térerősség: 0,56 mT max.
- Matracméret: 185x60 cm

### Kiegészítők:

- 60x50 cm párna applikátor (az alapsomag nem tartalmazza)
- 75x20 cm tekercs applikátor

### Ellenjavallat:

**ismeretlen vagy bizonyosan baktériumok okozta lázas megbetegedések, túlműködéses hormonbetegségek /pl. pajzsmirigy-túltengés/, epilepszia és terhesség esetén ne használja. Amennyiben pacemakert, inzulin pumpát, vagy egyéb elektronikus implantátumot használ, kérjük hogy a saját érdekében feltétlenül konzultáljon orvosával!**

**Figyelem! Betegség esetén a mágnesterápia nem használható kizárólagos gyógymódként! Betegség vagy annak gyanúja esetén forduljon orvoshoz, és az általa előírt kezelések mellett - orvosával egyeztetett módon - kiegészítő terápiaként használja a PROMAG -ot!**

A készülék csak a vele szállított hálózati tápegységgel és matracral, vagy a PROMAG gyártmányú 60x50cm-es párna vagy 75x20 cm-es tekercs applikátorral használható! A készüléket használatba vétel előtt az alábbi sorrendben csatlakoztassuk:

A készülék hátulján lévő APPLIKATOR feliratú csatlakozóba dugjuk be ütközésig a matrac, párna vagy tekercs applikátor Jack dugóját, majd utána a tápegység csatlakozókábelét a NETZTEIL feliratú aljzatba. A tápegységet ezután dugjuk be a hálózati aljzatba. A szétcsomagolást fordított sorrendbe végezzük. A készülék használata után húzzuk ki a tápegységet a hálózati aljzattól.

A vezérlő egység enyhén nedves ruhával, általános háztartási tisztítószerrel tisztítható, ne használjunk hozzá súrolószert! A matrac és az applikátorok nem

moshatóak, ezért intenzív használat esetén célszerű őket védőhuzatba helyezni, vagy letakart állapotban használni.

A matracot sík felületre tegyük használat előtt. A matracot, párnát és tekercs applikátort ne emeljük a kábelénél fogva, mert belül megsérülhet a csatlakozás. Tilos a matracba, párnába vagy tekercs applikátorba tűt vagy más hegyes tárgyat beleszúrni!

## **A pulzáló mágnesoterápia alkalmazása**

**Figyelem! Betegség esetén a mágnesoterápia nem használható kizárólagos gyógymódként! Betegség esetén forduljon orvoshoz, és az általa előírt kezelések mellett - orvosával egyeztetett módon - kiegészítő terápiaként használja a PROMAG -ot!**

A kezelés javasolt időtartama kb. 15-20 perc egy alkalommal (ne lépje túl naponta a 3-szori használatot vagy az 1 óra összes kezelési időt). Első alkalommal ajánlott 5 perces rövid kezeléssel kezdeni a pulzáló mágnesoterápiát. Minden ember másképpen reagál a mágneses térre, ezért mindenkinek ajánlott önmagának kiválasztani a számára legkedvezőbb kezelési időtartamot és paramétereket. A matracon fekve az egész testre ható, míg a párna vagy tekercs applikátor használatával helyi kezelést végezhetünk.

A terápia jótékony hatása néhány hetes rendszeres használat után jelentkezik, de megelőzésre is kiválóan alkalmas.

Az alábbiakban a különböző egészségügyi problémák kezelésére ajánlott, orvosi kezelés kiegészítő terápiaként használható frekvenciaértékek találhatók:

### **5Hz – 7Hz frekvenciatartomány**

- belső szervi problémák: epehólyag, húgyhólyag, prosztatata
- idegesség, feszültség, stressz
- alvásproblémák
- érrendszeri betegségek
- menstruációs problémák

### **8Hz – 11 Hz frekvenciatartomány**

- ízületi fájdalom és kopás
- Hexenschuss – ágyékzsába
- ficam, rándulás, izomhúzódás
- hát, váll és nyaktáji fájdalom
- fülzúgás

### **12Hz – 15 Hz frekvenciatartomány**

- asztma
- vérkeringési zavarok
- véraláfutás
- idegfájdalmak, isiász
- csontritkulás

### **16Hz – 19 Hz frekvenciatartomány**

- ízületi gyulladás, deformáció
- csigolyaporc károsodás
- fibromyalgia
- sebhely, hegg fájdalom, fantomfájdalom
- csonttörés, sérülés

## A kezelőszervek leírása



1. **ON/OFF (BE/KI)**: A gomb megnyomásával a készülék ki és bekapcsolható. Bekapcsolt állapotban az ON/OFF led (világító dióda) világít. A bekapcsoláskor a legutolsó használat működési paramétereit aktivizálják ismét.
2. **ERROR (HIBA)**: A led kigyullad, ha a matrac, párna vagy tekercs applikátor nincs, vagy hibásan van csatlakoztatva. A készülék ilyenkor nem működőképes.
3. **FREQUENCY (Frekvencia)**: A + gomb megnyomásával a frekvencia felfelé 19 Hz-ig növelhető. A - gomb megnyomásával a frekvencia lefelé 0 Hz-ig csökkenthető. 0 Hz állásban a matrac vagy az applikátorok kikapcsolt állapotban vannak.  
**FREKVENCIAPÁSZTÁZÁS**: A + gombot lenyomva tartva a 19 Hz-es frekvenciakijelzésnél az automatikus frekvenciapásztázás funkció bekapcsolódik. Ekkor az 1-19 Hz-es frekvenciatartomány minden értékén 5 mp-es lépésekben folyamatosan végigpásztáz a készülék, csökkentve majd növelve a frekvenciát 1 Hz-enként.. Ezt az üzemmódot sok felhasználó nagyon kellemesnek találja. A - gomb megnyomásával kiléphetünk ebből az üzemmódból.
4. **ACTIVE (Aktív)**: Amikor a matrac vagy az applikátorok mágneses teret sugároznak, ezen a kijelzőn egy világító futó fény látható. Működési szünetben a fény futása megáll - balra, jobbra lép. A fény haladási sebessége független a frekvencia beállításától.
5. **TIMER (Időzítő)**: Az időzítő automatikusan bekapcsolódik és a led kigyullad, amikor a működési frekvencia 4 Hz fölött van. Az időzítő beállítása kb. 30 perc. Ennyi idő eltelté után a készülék **automatikusan kikapcsol**, a frekvencia kijelzőn 0 jelenik meg.
6. **INTERVAL (Szakaszos üzemmód)**: A gomb megnyomásával a led kigyullad. Ebben az üzemmódban a mágneses tér 6 mp-ig aktív, utána 3 mp szünet következik, és ez a váltakozás ismétlődik. A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható. Egyes kutatók azon a véleményen vannak, hogy szakaszos üzemmódban az emberi test a mágneses energiát még hatékonyabban tudja hasznosítani.
7. **PULSE**: A + gomb megnyomásával a mágneses jel impulzus erőssége növelhető, a - gombbal pedig csökkenthető. Ezzel a mágneses aktív

időtartam 15 és 90 % között változtatható, a besugárzási idő jelentősen csökkenthető. Minden kigyulladó Led 15 % növekedést jelöl.

8. **NIGHT (Sötétített üzemmód)**: A gomb megnyomásával a kijelzőn minden fény kialszik, a frekvenciakijelző tizedespont kijelző pontját leszámítva. A készülék működését a fények lekapcsolása nem befolyásolja. A gomb ismételt megnyomásával megfelelő ledek ismét felgyulladnak.

#### MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓDOK TÁROLÁSA

Az impulzus erősség, a frekvencia és a frekvencialéptetéses üzem az ON/OFF gomb megnyomásával eltárolódik. A következő bekapcsoláskor a működés az eltárolt paraméterek szerint kezdődik. Így lehetővé válik egy külső időkapcsoló segítségével bármely kiválasztott időpontban a készüléket az eltárolt paraméterekkel működésbe hozni.

A készülék gyártója:

Hane Produktmanagement GmbH  
Am Zehntstadel 20  
86199 Augsburg, Németország

Magyarországi forgalmazó:

**Mission & Vision Kft**  
2045 Törökbálint, Meggyes u. 26.  
Tel.: 06-23-334674 fax: 06-23-334674  
email: [info@bestbuynet.hu](mailto:info@bestbuynet.hu)  
[www.bestbuynet.hu](http://www.bestbuynet.hu)  
[magnesterapia.info](http://magnesterapia.info)

**A készülékre 2 év a gyári garancia!**

